

4日獣発第58号  
令和4年5月25日

地方獣医師会会長 各位

公益社団法人 日本獣医師会  
会長 藏内勇夫  
(公印及び契印の押印は省略)

### 獣医師及び動物愛護管理行政担当者のための マイクロチップの装着・読取りガイドラインの送付について

このことについて、令和4年5月23日付け事務連絡をもって、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。

このたびの通知は、マイクロチップの装着等を行う獣医師、愛玩動物看護師及び行政担当者に向けて、マイクロチップの装着から読取り、登録確認等の流れについて示した「マイクロチップの装着・読取りガイドライン」を都道府県及び政令市あてに通知したことについて周知を依頼されたものです。

一方、本ガイドラインに示されているのは改正動愛法に基づく法定登録の流れであり、一般の獣医師による登録確認や情報検索はできないこととされています。確認等が必要な場合は、都度専用コールセンター（03-6384-5320）までお問合せ下さい。なお、AIPOデータベースは従来通りの運用であり、獣医師による検索が可能です。

つきましては、貴会会員及び関係者に周知方よろしくお願いいたします。

本件の問合せ先

公益社団法人日本獣医師会

担当：本田・中村・畠山・松岡

TEL：03-3475-1601

事 務 連 絡  
令和 4 年 5 月 23 日

公益社団法人 日本獣医師会 御中

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

獣医師及び動物愛護管理行政担当者のためのマイクロチップの装着・読取り  
ガイドラインの送付について

平素より動物愛護管理行政の推進につき、御理解及び御協力を賜り厚く御礼申  
し上げます。

標記の件について、別紙のとおり都道府県及び政令指定都市宛てに通知したの  
で、お知らせします。貴会におかれては、地方獣医師会を始めとする関係団体等  
へ周知のほど、お願いします。

**【連絡先】**

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室  
電話番号：03-3581-3351（内線 7415）  
担当氏名：浅利 達郎

獣医師及び動物愛護管理行政担当者のための  
マイクロチップの装着・読取りガイドライン

令和4年5月

環境省自然環境局動物愛護管理室  
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会

# 目次

はじめに

I	マイクロチップの装着 .....	4
(1)	装着から登録の流れ.....	4
(2)	装着を行う前に .....	4
(3)	装着の方法 .....	6
(4)	マイクロチップ装着証明書の発行 .....	10
II	マイクロチップの読取り.....	12
(1)	読取りから登録確認の流れ.....	12
(2)	読取りを行う前に.....	13
(3)	読取りの方法.....	14
(4)	読取りにおける注意事項.....	15
(5)	登録の確認 .....	15

## はじめに

令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。以下「法」という。）が改正され、犬猫等販売業者に対し、所有する犬又は猫へのマイクロチップの装着及び登録が義務付けられるとともに、登録を受けた犬や猫を譲り受けた者に対し、変更登録が義務付けられることになりました。これらの義務については令和4年6月1日から施行され、行政に引き取られる犬や猫にもマイクロチップが装着されている可能性が高まります。

また、マイクロチップの装着は獣医師と愛玩動物看護師に限られるとともに、獣医師に対しては、犬や猫にマイクロチップを装着した場合におけるマイクロチップ装着証明書の発行が義務付けられています。マイクロチップ装着証明書は、犬や猫の所有者（犬猫等販売業者又は飼い主）がマイクロチップの情報登録を行うために必要となります。

「獣医師及び動物愛護管理行政担当者のためのマイクロチップの装着・読取りガイドライン」は、マイクロチップ装着の施術に当たる獣医師の方や愛玩動物看護師の方、都道府県等の動物愛護管理担当職員などの行政従事者に向けて、マイクロチップの装着から登録の流れ、読取りから登録確認の流れ、これらに関する注意事項等について広く御理解いただくために作成したものです。

本ガイドラインが、犬や猫への安全なマイクロチップ装着及び確実なマイクロチップの読取りを行うための一助となりましたら幸いです。


## I マイクロチップの装着

### (1) 装着から登録の流れ


マイクロチップを装着した場合、装着した日から 30 日以内に、指定登録機関にマイクロチップの情報登録を行うことが義務付けられます。犬や猫の所有者が、マイクロチップの装着後に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから登録ができるよう、マイクロチップを装着したときは、獣医師は速やかに法に基づきマイクロチップ装着証明書を発行しなければなりません。

なお、犬や猫にマイクロチップを装着する際には、マイクロチップの情報登録が法に基づく義務であることを飼い主に伝達してください。

#### 【マイクロチップの装着：獣医師】

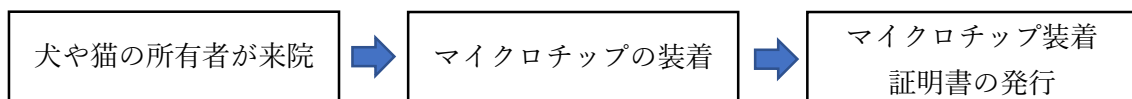

#### 【マイクロチップの情報登録：犬や猫の所有者】

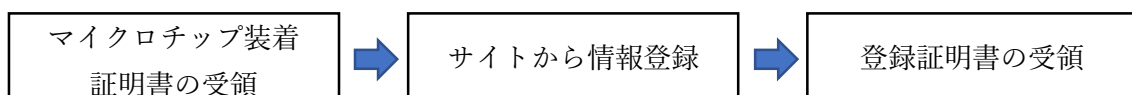

※装着証明書の様式のダウンロード、情報登録と登録証明書の受領はオンラインで行えます。

### (2) 装着を行う前に

#### ア マイクロチップ及びマイクロチップリーダーの準備

マイクロチップ及びマイクロチップリーダーを事前に準備します。マイクロチップは、国際標準化機構が定める IS011784、IS011785 規格に準拠したマイクロチップでなければなりません。また、マイクロチップは ISO 規格動物用電子タグ協議会に登録されたメーカーコードが付与されたものを準備して

ください。マイクロチップリーダーについても、ISO 規格に対応した製品を準備します。

#### イ マイクロチップ装着証明書の様式のダウンロード

装着後、速やかにマイクロチップ装着証明書を発行できるよう、事前にマイクロチップ装着証明書の様式をダウンロードしておきます。ダウンロードは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」( <https://reg.mc.env.go.jp/> ) から行います。

Word ファイルでのダウンロードが可能で、獣医師名や動物病院等の所在地、電話番号などを事前に入力することができます。

#### ウ マイクロチップの識別番号の確認

マイクロチップにマイクロチップリーダーを当てて、読取りテストを行います。マイクロチップに付属されたバーコードシールに記載されているマイクロチップの識別番号と、マイクロチップリーダーに表示された番号が一致していることを必ず確認します。

#### エ 生体にマイクロチップが装着されていないことの確認

装着を行う犬や猫にマイクロチップリーダーを当てて、マイクロチップが装着されていないことを確認します。1 個体に 2 つのマイクロチップの識別番号を登録することはできません。誤って 2 つ装着されてしまうことがないよう、所有者からの申出の有無に関わらず、必ず生体の読取りを行い確認します。

(3) 装着の方法

ア 肩甲骨後ろの皮膚を親指と中指でつまみます。

※犬や猫が動く場合には、装着する方以外の方に保定をしてもらい装着作業を行います。

※1人で保定して装着する場合には、皮膚を寄せる親指、人差し指、中指以外の指と手のひらを利用して生体の頭が振り向かないように押さえてください。



イ 犬や猫が動かないように保定し、通常の皮下注射と同様に装着部位の皮膚を消毒します。





ウ つまんだ中央の皮膚を人差し指で上に引っ張ります。

うまく引っ張ることができると、引っ張った皮膚が三角形になります。

この三角形の部分に皮下注射の要領でマイクロチップを埋め込みます。

※ここで皮膚が緩んでいると針が奥までうまく刺さりません。

人差し指でしっかりと余分な皮膚を持ち上げます。



#### ※ マイクロチップの装着部位

マイクロチップは、背部肩甲骨間の尾側寄り、正中線よりやや左寄りに装着します。

尾側寄りとすることで MRI 等の影響を受けにくくなり、左寄りとすることで椎体突起に触れるリスクが低減されます。

- エ 筋肉や神経を傷つけないようにするために、インジェクターを立てずに頭を下げた状態で保定をし、体に対して水平に挿入します。



- オ 素早く針を刺した後、プランジャーを最後まで押し込み、マイクロチップを挿入します。



カ 装着完了後には、出血していないか、貫通していないか等をよく観察し、必ずマイクロチップの識別番号の読取りテストを行い、確実に装着されていることを確認します。

※マイクロチップの脱落は、装着後 24 時間以内に多いと言われています。



キ 装着部位から出血する場合には、出血部分に乾綿を当てて1～2分ほど圧迫止血を行います。

出血が止まらない場合は、血管収縮作用のあるアドレナリン外用液などを乾綿に浸み込ませて出血部に当てて、引き続き圧迫止血をします。

資料提供：共立製薬株式会社

#### (4) マイクロチップ装着証明書の発行

犬や猫にマイクロチップを装着したときは、獣医師はマイクロチップ装着証明書を発行することが義務付けられています。獣医師の指示の下、愛玩動物看護師もマイクロチップを装着することができますが、装着証明書の「マイクロチップを装着した獣医師の氏名」の欄には、装着の指示をした獣医師の氏名を記載します。

マイクロチップ装着証明書には、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトの URL と二次元コードが記載されています。犬や猫の所有者に、サイトにアクセスし、登録を行うよう案内をしてください。

様式第 22 (第 21 条の 5 第 2 項関係)

年 月 日

マイクロチップ装着証明書

動物の愛護及び管理に関する法律第 39 条の 3 第 1 項の規定に基づき、下記のとおりマイクロチップ装着証明書を発行する。

記

1 マイクロチップの識別番号	マイクロチップに付属のバーコードシールを貼付けてください
2 犬又は猫の名	
3 犬又は猫の別	<input type="checkbox"/> 犬 <input type="checkbox"/> 猫
4 犬又は猫の品種	
5 犬又は猫の毛色	
6 犬又は猫の生年月日	年 月 日
7 犬又は猫の性別	<input type="checkbox"/> 雄 (オス) <input type="checkbox"/> 雌 (メス)
8 2 から 7 までのほか犬又は猫の特徴となるべき事項	
9 マイクロチップの装着日	年 月 日
10 マイクロチップを装着した施設名及び所在地 (診療施設にあっては獣医療法施行規則第 1 条第 1 項第 3 号に規定する開設の場所)	〒
11 マイクロチップを装着した施設の電話番号	

マイクロチップを装着した獣医師の氏名

マイクロチップの登録先

犬と猫のマイクロチップ情報登録

環境大臣指定登録機関

公益社団法人日本獣医師会



<https://reg.mc.env.go.jp>

備考 この証明書の用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

## II マイクロチップの読取り

### (1) 読取りから登録確認の流れ

#### ア 動物病院の場合

動物病院等に所有者不明の犬や猫が持ち込まれ、マイクロチップの読取りによって識別番号が確認できた場合には、指定登録機関のコールセンターへ連絡します。コールセンターで登録の有無を確認し、登録の確認ができた場合には、コールセンターから登録者に保護されている当該犬や猫を引取りに行くように連絡をします。

#### 【指定登録機関のコールセンター連絡先】

メールアドレス info@mc.env.go.jp


電話番号 03-6384-5320

#### イ 行政機関等の場合


行政機関に所有者不明の犬や猫が持ち込まれた場合や、所有者から犬や猫の引取りを行った場合であって、マイクロチップの読取りによって識別番号が確認できた場合には、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにログインし、所有者の情報を確認します。また、動物病院等に持ち込まれた犬や猫のマイクロチップの識別番号を照会された場合にも同様に、登録サイトから登録情報を確認して、登録者に保護されている当該犬や猫を引取りに来るよう連絡をします。

マイクロチップ読取り

【マイクロチップの読取り：動物病院】

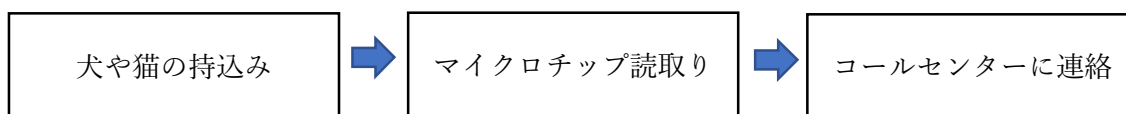

【マイクロチップの読取り：行政機関】

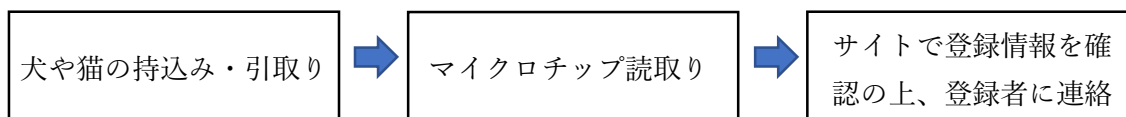

(2) 読取りを行う前に

ア ISO規格に準拠したマイクロチップリーダーを準備します。

日本国内に流通しているマイクロチップはISO規格に統一されていますが、米国等のISO規格を採用していない国で装着されている場合には、規格が合わずにマイクロチップの読取りができません。ISO規格でないマイクロチップは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」には登録できず、登録情報の検索もできません。

イ マイクロチップリーダーのバッテリー残量を確認します。

マイクロチップリーダーのバッテリーが少ないと適切な読取りができないことがあります。そのため、充電や電池交換により、あらかじめバッテリー残量を確保してください。

ウ 読取り場所周辺の電子機器や金属製品の有無を確認します。

マイクロチップリーダーが電波を発信したり受信したりする際、電子機器や金属製品から影響を受ける可能性があります。電子機器や金属製品が近くにある場合は、距離を離して使用します。



エ 行政機関が読取りを行う場合においては、システムで使用するアカウントを確認しておきます。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにログインするためには、個別に発行されるアカウントが必要です。指定登録機関から発行されているアカウント ID とパスワードを使用します。

### (3) 読取りの方法

ア 装着部位（背部肩甲骨間の尾側寄り、正中線よりやや左寄り）の周辺から読取りを開始します。

イ リーダーを犬や猫の被毛に接触させながら沿わせるように操作します。

ウ 縦、横にゆっくりと動かします。

エ 肩や首の周辺で読取りができなければ全身の読取りを行います。

オ 読取りができない場合には、リーダーを当てる角度を変えます。



資料提供：共立製薬株式会社



#### (4) 読取りにおける注意事項

##### ア 読取り距離について

マイクロチップリーダーの機器の種類によって、読取り感度は異なります。また、同じマイクロチップリーダーでも、マイクロチップリーダーを当てる向きによって、読取り距離に差異が生じます。犬や猫の体に沿わせて、縦横にゆっくり動かしながら読み取るのがポイントです。

##### イ 読取りの範囲について

マイクロチップは装着部位から、肘や脇腹まで皮下を移動することがあります。装着部位付近で読取りができない場合は、範囲を広げながら全身を検索する必要があります。

##### ウ マイクロチップリーダーの取扱いについて

読取りボタンの押し方（1回だけ押す、押しながら読むなど）や、マイクロチップリーダーの読取り面、読取り角度などは、それぞれのマイクロチップリーダーの機器の種類によって異なります。最適な読取り方法について、取扱説明書等を確認する必要があります。

#### (5) 登録の確認

動物病院等はマイクロチップの識別番号の読取り後、指定登録機関のコールセンターに連絡し、コールセンターが「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて、登録された所有者の確認を行います。その際に、指定登録機関のコールセンターから動物病院等に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されているかの結果を伝達します。

行政機関はマイクロチップの識別番号の読取り後、「犬と猫のマイクロチッ

プ情報登録」サイトにて、登録された所有者の確認を行います。

所有者の登録が確認できなかった場合には、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」が開始される令和4年6月より前に民間登録団体に登録されている可能性がありますので、それぞれの民間登録団体にも照会してください。

## 本ガイドラインに関するお問い合わせ

犬と猫のマイクロチップ情報登録

環境大臣指定登録機関

公益社団法人日本獣医師会

所在地 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階

ホームページ <https://reg.mc.env.go.jp/>

(ホームページの開設は令和4年6月1日となります)

メールアドレス info@mc.env.go.jp

電話番号 03-6384-5320

